

Тест на беременность

Clearblue Plus (Клиблү Плюс)

- Точность свыше 99 % со дня ожидаемого начала менструации.
- **Внимательно прочтите данный листок-вкладыш перед проведением теста.**

1 Перед проведением теста

Для проведения теста вам могут понадобиться часы.

Со дня ожидаемого начала менструации тест можно проводить в любое время дня.



2 Выполните тест

Когда вы будете готовы к выполнению теста, извлеките тест из упаковки из фольги и снимите колпачок. Сразу же используйте тест.

Проводить тест можно непосредственно под струей мочи **либо** в образце мочи, собранном в чистую, сухую емкость.

- Удерживайте тест, направив окрашивающийся наконечник вниз, под струей мочи **или** в собранном образце мочи на протяжении **5 секунд**, как показано на рисунке.
- Наконечник сразу окрасится в розовый цвет, указывая на впитывание мочи. **Продолжайте держать окрашивающийся наконечник под струей мочи ровно 5 секунд.**

- Держите окрашивающийся наконечник направленным вниз или разместите тест в горизонтальном положении, пока в контрольном окошке не появится голубая линия и результат.
- Наденьте колпачок обратно.



Продолжайте держать окрашивающийся наконечник под струей мочи ровно 5 секунд.

5 секунд

Начинайте отсчет 5 секунд, когда окрашивающийся наконечник станет розовым.

Струя мочи **ЛИБО** Собранный образец

- Если окрашивающийся наконечник не поменяет полностью цвет на розовый, см. вопрос 5.



ПОДОЖДИТЕ 3 МИНУТЫ.

Когда тест начнет работать, вы увидите, как начнет(-ут) появляться голубая(-ые) линия(-и).

3 Считайте результат


Вы можете считать свой результат в окошке с результатом.

Не считывайте результат до появления в контрольном окошке голубой линии. Данная линия указывает на то, что тест сработал.

Результат «Беременна» может появиться через 1 минуту, если тестирование проводится начиная с первого дня задержки (т. е. на следующий день после дня ожидаемого начала менструации).

Чтобы подтвердить результат «Не беременна», следует подождать 3 минуты (см. вопрос 8).

Если голубая линия не отображается в контрольном окошке, тест не сработал (см. вопрос 6).

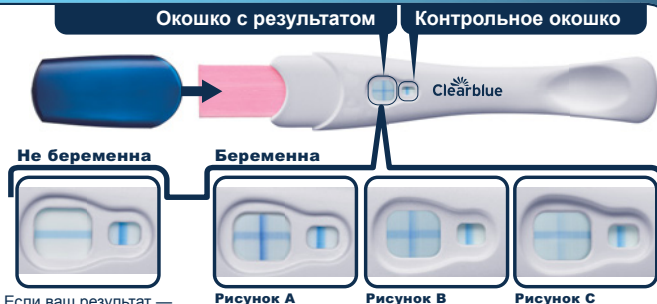

Если ваш результат — «**Не беременна**», см. вопрос 10.

- Если ваш результат «**Беременна**», см. вопрос 11.
- Если вы по-прежнему не уверены в своем результате, см. вопрос 7.

Не имеет значения, если одна из линий, которые составляют знак «+», светлее или темнее другой. Результат — «Беременна».

ВАЖНО! Считайте результат теста в течение **10 минут** после проведения теста. Не принимайте во внимание никакое изменение результата теста по истечении этого времени.

Вопросы и ответы

- 1. Насколько точен результат теста Clearblue?**
Лабораторные анализы показали, что точность теста Clearblue превышает 98% при использовании со дня ожидаемого начала менструации.
- 2. Каков принцип работы теста Clearblue?**
Когда вы беременны, ваш организм вырабатывает гормон беременности ХГЧ (хорионический гонадотропный гормон человека). На ранних сроках беременности количество ХГЧ в организме увеличивается. Технология экспресс-определения Clearblue позволяет определить даже незначительное количество этого гормона в моче (чувствительность этого теста составляет 25 мМЕ/мл).
- 3. Когда можно использовать тест Clearblue Plus (Клиабу Плюс)?**
Тест можно использовать за 5 дней до задержки менструации, то есть за 4 дня до ожидаемого начала менструации. Однако, если вы проводите тестирование раньше ожидаемого начала менструации и получаете результат «Не беременна», все еще существует вероятность, что вы беременны. В таблице ниже приведены результаты клинических испытаний теста с использованием проб на беременность, взятых у женщин на ранних сроках беременности.

| Раннее тестирование | |
|--|---|
| Количество дней до ожидаемого начала менструации | % образцов, взятых у беременных женщин, с результатом «Беременна» |
| -1 | 98 % |
| -2 | 97 % |
| -3 | 88 % |
| -4 | 56 % |

- 4. Могут ли какие-либо лекарственные препараты или состояние здоровья повлиять на результат?**
- Перед проведением теста всегда читайте инструкции производителей всех принимаемых вами лекарств.
 - Лекарства для повышения фертильности, содержащие ХГЧ, могут стать причиной отображения результата, вводящего в заблуждение (такие препараты для повышения фертильности вводятся, как правило, в виде инъекций, и тестирование в течение небольшого периода времени после инъекции может привести к ложному результату «Беременна»).
 - Другие препараты для повышения фертильности (например, кломифена цитрат), обезболяющие препараты и гормональные контрацептивы (например, противозачаточные таблетки) не должны влиять на результат.
 - Если вы недавно прекратили использовать гормональную контрацепцию, или принимаете такие лекарственные средства для лечения бесплодия, как кломифена цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, что может привести к преждевременному выполнению теста.
 - Можно получить ошибочный результат «Беременна» в том случае, если недавно вы были беременны (даже если беременность завершилась раньше срока).
 - К результату, вводящему в заблуждение, могут привести: внематочная беременность, кисты яичников, менопауза, а также некоторые редкие заболевания.
 - Если получен результат «Беременна», впоследствии вы можете обнаружить, что не беременны, поскольку беременность может естественным способом прерваться на ранних стадиях. В случае получения неожиданного результата следует обратиться к врачу.
- 5. Я использовала тест на беременность, но окрашивающийся наконечник не окрасился в розовый цвет полностью. Что мне делать?**
Если окрашивающийся наконечник не стал полностью розовым, то, вероятно, вы использовали недостаточное количество мочи.

Тем не менее, если в течение 10 минут после проведения теста в контрольном окошке появилась голубая линия, то тест сработал. Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение 10 минут после проведения теста, см. вопрос 6.

- 6. Я использовала тест на беременность, но в контрольном окошке не появилась голубая линия. Что мне делать?**
Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение 10 минут после проведения теста, то тест не сработал. К этому могли привести следующие причины.
- Окрашивающийся наконечник не был направлен вниз, либо тест не был расположен горизонтально после попадания на него мочи.
 - Использовано слишком мало или слишком много мочи.
- Обзор пробы должен длиться 5 секунд.**
Необходимо провести повторное тестирование, используя новый тест и внимательно следуя инструкциям. Соберите образец мочи в чистую, сухую емкость и погрузите туда только окрашивающийся наконечник за 5 секунд.
- 7. Что делать, если я не уверена в своем результате?**
- Результат «Беременна» подтверждается наличием голубой линии в контрольном окошке и знаком «+», появившимся в окошке с результатом в течение 10 минут с момента проведения теста. Знак «+» в окошке результата может выглядеть по-разному, однако, линии, составляющие знак «+», и линия в окошке контроля должны иметь одинаковую ширину (см. рисунки A–C).
- Рисунк А**
У беременных женщин такой результат возможен при проведении тестирования через несколько дней после задержки менструации, т. е. при более высоком уровне ХГЧ.
- Рисунк В**
У беременных женщин такой результат не редкость при проведении тестирования непосредственно в день или примерно в день задержки менструации, когда уровень ХГЧ остается относительно низким.
- Рисунк С**
Даже слабое отображение результата все же указывает на результат «Беременна».
- Если вы по-прежнему не уверены в своем результате, проведите повторный тест не ранее чем через 3 дня, внимательно следуя инструкциям.
- Результат «Не беременна» подтверждается наличием голубой линии в контрольном окошке и знаком «-», появившимся в окошке с результатом в течение 10 минут с момента проведения теста. Если ваш результат — «Не беременна», но вы считаете, что можете быть беременны, см. вопрос 10.
- 8. Когда можно считать результат теста?**
Результат «Беременна» может появиться всего за 1 минуту, если тестирование проводится начиная со дня задержки (т. е. на следующий день после ожидаемого начала менструации). До того, как вы начнете считывание результата, убедитесь, что в контрольном окошке присутствует голубая линия. Для подтверждения результата «Не беременна» необходимо подождать 3 минуты. Если в течение 10 минут после проведения теста в контрольном окошке голубая линия не появилась, тест не сработал (см. вопрос 6).
- 9. Как долго будет отображаться результат теста?**
Результат можно считать в течение 3–10 минут после проведения теста. Не обращайте внимания на изменение результата, произошедшее через 10 минут.
- 10. Результат моего теста — «Не беременна». Что мне делать?**
Вы можете быть не беременны, или уровень гормона беременности еще недостаточно высок для обнаружения. Вы также могли неверно рассчитать день ожидаемого начала менструации.
- Если было проведено раннее тестирование, следует провести повторный тест после дня ожидаемого начала менструации.
 - В случае задержки менструации проведите повторный тест через 3 дня. Если при повторном тестировании получен результат «Не беременна», но менструация по-прежнему не, обратитесь к врачу.
- 11. Результат моего теста — «Беременна». Что мне делать?**
Если результат вашего теста — «Беременна», следует обратиться к врачу для консультации по поводу дальнейших действий.

www.clearblue.com

Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибуторская Компания» Р/Ф, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2. Телефон: 8 800 333 5198

Импортер: ИООО «АИЛДИ-Вест», 220140, г. Минск, ул. Домбровская, 9, оф. 7.3.1

Производитель: ЗсГлиДи Саис Пресижн Диагностик ГмБХ (SPD),

47 Рут де Ст.-Жорж, 1213 Петит Ланс, Женева, Швейцария.

Произведено на: Алер (Шанхай) Диагностик Ко., Лтд, Шанхай 201203, Китай.

Упаковщик: Сонокс Польша — Пекаджин Сервисес СП.

Clearblue — торговая марка SPD. © SPD, 2018. Все права защищены.

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| | Производитель | | Не используйте повторно |
| | Код партии | | Медицинское устройство для диагностики <i>in vitro</i> |
| | Срок годности | | Предельно допустимая температура 2–30 °С |

Для получения консультации по поводу дальнейших действий, информации и общих рекомендаций по вопросам беременности посетите наш сайт: www.clearblue.com



Для самотестирования дома.

Только для диагностического использования *in vitro*.

Не для внутреннего пользования.

Не используйте повторно.

Храните в местах, недоступных для детей.

Храните при температуре от 2 до 30 °С.

В случае хранения в холодильнике, довести до комнатной температуры в течение 30 минут до начала тестирования.

Не используйте в случае повреждения обертки из фольги.

Не используйте после истечения срока годности.

Утилизируйте вместе с бытовыми отходами.

Не стерильно.