Clearblue™

Тест на беременность

Clearblue Plus (Клиаблу Плюс)

- Точность свыше 99 % со дня ожидаемого начала менструации.
- **Внимательно прочтите данный листок-вкладыш перед проведением теста.**

1 Перед проведением теста

Для проведения теста вам могут понадобиться часы.

Со дня ожидаемого начала менструации тест можно проводить в любое время дня.



- Держите окрашивающийся наконечник направленным вниз или разместите тест в горизонтальном положении, пока в контрольном окошке не появится голубая линия и результат.
- Наденьте колпачок обратно.

2 Выполните тест

Когда вы будете готовы к выполнению теста, извлеките тест из обертки из фольги и снимите колпачок. Сразу же используйте тест.

Проводить тест можно непосредственно под струей мочи **либо** в образце мочи, собранном в чистую, сухую емкость.

- Удерживайте тест, направив окрашивающийся наконечник вниз, под струей мочи **или** в собранном образце мочи на протяжении **5 секунд,** как показано на рисунке.
- Наконечник сразу окрасится в розовый цвет, указывая на впитывание мочи. **Продолжайте держать окрашивающийся наконечник под струей мочи ровно 5 секунд.**



- Если окрашивающийся наконечник не поменяет полностью цвет на розовый, см. вопрос 5.

3 минуты

ПОДОЖДИТЕ 3 МИНУТЫ. **Когда тест начнет работать, вы увидите, как начнет(-ут) появляться голубая(-ые) линия(-и).**

3 Считайте результат


Вы можете считать свой результат в окошке с результатом.

Не считывайте результат до появления в контрольном окошке голубой линии. Данная линия указывает на то, что тест сработал.

Результат «Беременна» может появиться через 1 минуту, если тестирование проводится начиная с первого дня задержки (т. е. на следующий день после дня ожидаемого начала менструации).

Чтобы подтвердить результат «Не беременна», следует подождать 3 минуты (см. вопрос 8).

Если голубая линия не отображается в контрольном окошке, тест не сработал (см. вопрос 6).

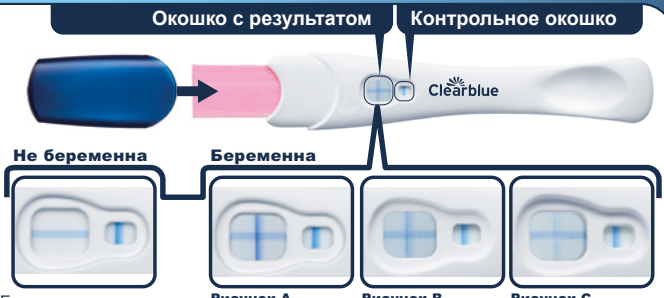

Если ваш результат — **«Не беременна»**, см. вопрос 10.

- Если ваш результат **«Беременна»,** см. вопрос 11.
- Если вы по-прежнему не уверены в своем результате, см. вопрос 7.

Не имеет значения, если одна из линий, которые составляют знак «+», светлее или темнее другой. Результат — «Беременна».

ВАЖНО! Считайте результат теста в течение **10 минут** после проведения теста.

Не принимайте во внимание никакое изменение результата теста по истечении этого времени.

Вопросы и ответы

1 Насколько точен результат теста Clearblue?
Лабораторные анализы показали, что точность теста Clearblue превышает 99 % при использовании со дня ожидаемого начала менструации.

2 Каков принцип работы теста Clearblue?
Когда вы беременны, ваш организм вырабатывает гормон беременности ХГЧ (хорионический гонадотропный гормон человека). На ранних сроках беременности количество ХГЧ в организме увеличивается. Технология экспресс-определения Clearblue позволяет определить даже незначительное количество этого гормона в моче (чувствительность этого теста составляет 25 мМЕ/мл).

3 Когда можно использовать тест Clearblue Plus (Клиаблу Плюс)?
Тест можно использовать за 5 дней до задержки менструации, то есть за 4 дня до ожидаемого начала менструации. Однако, если вы проводите тестирование раньше ожидаемого начала менструации и получаете результат «Не беременна», все еще существует вероятность, что вы беременны. В таблице ниже приведены результаты клинических испытаний теста с использованием проб на беременность, взятых у женщин на ранних сроках беременности.

Раннее тестирование

Количество дней до ожидаемого начала менструации	% образцов, взятых у беременных женщин, с результатом «Беременна»
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

4 Могут ли какие-либо лекарственные препараты или состояние здоровья повлиять на результат?
- **Перед** проведением теста всегда читайте инструкции производителей всех принимаемых вами лекарств.
- Лекарства для повышения фертильности, содержащие ХГЧ, могут стать причиной отображения результата, вводящего в заблуждение (такие препараты для повышения фертильности вводятся, как правило, в виде инъекций, и тестирование в течение небольшого периода времени после инъекции может привести к ложному результату «Беременна»).
- Другие препараты для повышения фертильности (например, кломифена цитрат), обезболивающие препараты и гормональные контрацептивы (например, противозачаточные таблетки) не должны влиять на результат.
- Если вы недавно прекратили использовать гормональную контрацепцию, или принимаете такие лекарственные средства для лечения бесплодия, как кломифена цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, что может привести к преждевременному выполнению теста.
- Можно получить ошибочный результат «Беременна» в том случае, если недавно вы были беременны (даже если беременность завершилась раньше срока).
- К результату, вводящему в заблуждение, могут привести: внематочная беременность, кисты яичников, менопауза, а также некоторые редкие заболевания.
- Если получен результат «Беременна», впоследствии вы можете обнаружить, что не беременны, поскольку беременность может естественным способом прерваться на ранних стадиях.

В случае получения неожиданного результата следует обратиться к врачу.

5 Я использовала тест на беременность, но окрашивающийся наконечник не окрасился в розовый цвет полностью. Что мне делать?
Если окрашивающийся наконечник не стал полностью розовым, то, вероятно, вы использовали недостаточное количество мочи.

Тем не менее, если в течение 10 минут после проведения теста в контрольном окошке появилась голубая линия, то тест сработал. Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение 10 минут после проведения теста, см. вопрос 6.

6 Я использовала тест на беременность, но в контрольном окошке не появилась голубая линия. Что мне делать?
Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение 10 минут после проведения теста, то тест не сработал. К этому могли привести следующие причины.
- Окрашивающийся наконечник не был направлен вниз, либо тест не был расположен горизонтально после попадания на него мочи.
- Использовано слишком мало или слишком много мочи.

Отбор пробы должен длиться 5 секунд.
Необходимо провести повторное тестирование, используя новый тест и внимательно следуя инструкциям. Соберите образец мочи в чистую, сухую емкость и погрузите туда только окрашивающийся наконечник на 5 секунд.

7 Что делать, если я не уверена в своем результате?
- Результат «Беременна» подтверждается наличием голубой линии в контрольном окошке и знаком «+», появившимся в окошке с результатом в течение 10 минут с момента проведения теста.

Знак «+» в окошке результата может выглядеть по-разному, однако, линии, составляющие знак «+», и линия в окошке контроля должны иметь одинаковую ширину (см. рисунки A–C).

Рисунок A
У беременных женщин такой результат возможен при проведении тестирования через несколько дней после задержки менструации, т. е. при более высоком уровне ХГЧ.

Рисунок B
У беременных женщин такой результат не редкость при проведении тестирования непосредственно в день или примерно в день задержки менструации, когда уровень ХГЧ остается относительно низким.

Рисунок C
Даже слабое отображение результата все же указывает на результат «Беременна».
Если вы по-прежнему не уверены в своем результате, проведите повторный тест не ранее чем через 3 дня, внимательно следуя инструкциям.
- Результат «Не беременна» подтверждается наличием голубой линии в контрольном окошке и знаком «-», появившимся в окошке с результатом в течение 10 минут с момента проведения теста. Если ваш результат — «Не беременна», но вы считаете, что можете быть беременны, см. вопрос 10.

8 Когда можно считать результат теста?
Результат «Беременна» может появиться всего за 1 минуту, если тестирование проводится начиная со дня задержки (т. е. на следующий день после ожидаемого начала менструации). До того, как вы начнете считывание результата, убедитесь, что в контрольном окошке присутствует голубая линия. Для подтверждения результата «Не беременна» **необходимо** подождать 3 минуты. Если в течение **10 минут** после проведения теста в контрольном окошке голубая линия не появилась, тест не сработал (см. вопрос 6).

9 Как долго будет отображаться результат теста?
Результат можно считывать в течение 3–10 минут после проведения теста. Не обращайте внимания на изменение результата, произошедшее через 10 минут.

10 Результат моего теста — «Не беременна». Что мне делать?
Вы можете быть не беременны, или уровень гормона беременности еще недостаточно высок для обнаружения. Вы также могли неверно рассчитать день ожидаемого начала менструации.
- Если было проведено раннее тестирование, следует провести повторный тест после дня ожидаемого начала менструации.
- В случае задержки менструации проведите повторный тест через 3 дня. Если при повторном тестировании получен результат «Не беременна», но менструации по-прежнему нет, обратитесь к врачу.

11 Результат моего теста — «Беременна». Что мне делать?
Если результат вашего теста — «Беременна», следует обратиться к врачу для консультации по поводу дальнейших действий.

www.clearblue.com

Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» РФ, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2. Телефон: 8 800 333 5198
Импортер: ИООО «АЛИДИ-Вест», 220140, г. Минск, ул. Домбровская, 9, оф. 7.3.1

Производитель: ЭсПиДи Свис Пресижн Дайагностик ГмбХ (SPD), 47 Рут де Ст.-Жорж, 1213 Петит Лэнси, Женева, Швейцария.

Произведено на: Алер (Шанхай) Диагностикс Ко., Лтд, Шанхай 201203, Китай.

Clearblue — торговая марка SPD. © SPD, 2022. Все права защищены.

	Производитель		Не используйте повторно
LOT	Код партии	IVD	Медицинское устройство для диагностики *in vitro*
	Срок годности	2°C 30°C	Предельно допустимая температура 2–30 °C

Для получения консультации по поводу дальнейших действий, информации и общих рекомендаций по вопросам беременности посетите наш сайт: **www.clearblue.com**

Для самотестирования дома.
Только для диагностического использования *in vitro*.
Не для внутреннего пользования.
Не используйте повторно.
Храните в местах, недоступных для детей.
Храните при температуре от 2 до 30 °C.
В случае хранения в холодильнике, довести до комнатной температуры в течение 30 минут до начала тестирования.
Не используйте в случае повреждения обертки из фольги.
Не используйте после истечения срока годности.
Утилизируйте вместе с бытовыми отходами.
Не стерильно.

733312.0 05-2022